

Portable Conditioning Machine
ポータブルコンディショニングマシン



CTR

CARE TRAINING RECOVERY

 Techno Link®



Portable Conditioning Machine

トレーナーが求める機能を一台に 独立4CHコンパクトケアマシン



「トレーナー活動は遠征が多く、本格的なケアが難しい。」

そんな現場のお悩みを解決するために“CTR”は開発されました。

複数のポイントへ同時にアプローチ可能な独立4CH仕様。

約2.6kgと持ち運びに適した本体重量。

また、電源のない屋外でも使用可能なポータブルバッテリーをご用意しました。

CTRは、あなたの快適なコンディショニングライフをサポートします。

現場が本当に

目的に合わせた4つのモード

M³wave
EMS

2.7kHz
MCR



A ケアモード

スポーツにおいて起きる様々なシーンで活躍できるモードとして設定。特殊波形 M³waveが浅層の筋肉はもちろん、深層の筋肉までの運動をサポートします。



B トレーニングモード

筋肉の種類を問わず、出力と同時に効果的な筋運動をさせることで、日頃使われていない筋肉の運動をサポートします。



C リカバリー (MCR) モード

マイクロカレント

変調多重型微弱電流 (M³マイクロカレント) を搭載したモード。ハードなトレーニング後のコンディショニングを整えます。



D ボディメイクモード

ケアモードとトレーニングモードの特性をチャンネルによって分けたモード。異なるモードを合わせる事で、それぞれの筋肉の状態によって分けていたモード選択のわずらわしさから解放します。


欲しい機能を追求 —

バッテリー × 専用ケース 場所を選ばない コンディショニング

いつでも場所を選ばず使用可能な充電式バッテリーに加え、本体やバッテリー・導子やコード類をコンパクトに収納可能な大容量専用ケースをオプションとしてご用意しました。遠征先やグラウンドといった屋外でも、使いたい場面でスムーズに持ち出し、コンディショニングが可能です。



特許取得波形搭載

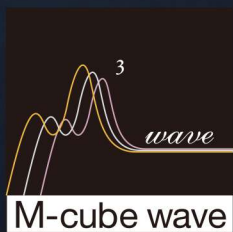

US 6,526,319 B2:USA

特許取得波形 M³wave は、電気特有のチクチクした痛みを伴わず、優れた深部浸透性により、深層筋肉まで作用します。絶えず周波数が変化するため、電気刺激への筋肉の慣れを防ぎ、効果的なトリートメントを提供します。

ワンジョグダイヤルで直感的に操作



直感的に操作可能なフルカラータッチパネルを搭載。また、出力チャンネルの複数選択により、使いたいチャンネルをタッチし、ジョグダイヤルをまわせば同時に出力を上げることが可能です。忙しいトレーナー活動中でも作業工程を最小限に抑えます。

目的に合わせた豊富な導子

ポイントプローブ (ダブル)

筋や腱を把持しやすく、適度な圧を加えながら施術を行うことができます。



粘着導子

曲面や凹凸のある部位にもしっかりと貼り付けることができます。



グローブ導子*

手のひらや指先を使い患部の状態を常に感じながら施術を行うことができます。



*グローブ導子はオプション品です。

SPEC



定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
出力周波数	1~125,000Hz
最大出力電流	M ³ wave: 約70mA _{rms} (500Ω負荷時) 微弱M ³ wave: 約800μA _{rms} (500Ω負荷時)
タイマー	1~99分
チャンネル数	出力独立4チャンネル
本体寸法(約)	幅340mm × 奥行225mm × 高さ90mm
本体重量(約)	2.6kg

OPTION

バッテリーや専用ケース・カートを選択できるオプション品としてご用意しました。
ご希望の用途に合わせたセットでさまざまなシーンに対応します。

バッテリー



ケース



カート



カラー名

カラー名

■標準付属品

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ●ACアダプター…………… 1個 | ●ポイントプローブ(ダブル)…………… 1本 |
| ●ACコード…………… 1個 | ●取扱説明書…………… 1部 |
| ●パッドコード 1.7m…………… 各色1本 | ●保証書…………… 1部 |
| ●粘着導子(4枚入り)…………… 2袋 | ●保証登録はがき…………… 1部 |

※仕様及び規格はお断りなしに変更することがあります。 ※製品の色はカタログの色と異なる場合があります。

■製造販売元



[本 社] 〒956-0804 新潟県新潟市秋葉区荻島2-30-15
TEL.0250-21-6251 FAX.0250-24-2151



■本製品のお問い合わせは

販売店

※本誌の一部または全部を無断で複製複製することは複製権(著作権法第21条)の侵害にあたります。
また、それらをインターネットなどで公開することも公衆送信権(著作権法第23条)の侵害にあたります。



CTR2H

CARE TRAINING RECOVERY

PORTABLE
CONDITIONING
MACHINE

2チャンネル

CTR2H

CARE TRAINING RECOVERY

シンプルなのに、しっかり使える。

トレーナー活動は遠征が多く、
本格的なケアが難しい。

そんな現場のお悩みを解決するために“CTR2H”は開発されました。複数のポイントへ同時にアプローチ可能な独立2チャンネル仕様。約2.5kgと持ち運びに適した本体重量。また、電源のない屋外でも使用可能なポータブルバッテリーをご用意しました。CTR2Hは、あなたの快適なコンディショニングライフをサポートします。



充実の快適機能


バッテリー × 専用ケース



いつでも場所を選ばず使用可能な充電式バッテリーに加え、本体やバッテリー・導子やコード類をコンパクトに収納可能な大容量専用ケースをオプションとしてご用意しました。

遠征先やグラウンドといった屋外でも、使いたい場面でスムーズに持ち出し、コンディショニングが可能です。

特殊波形搭載

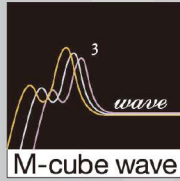

M-cube wave

特殊波形M³waveは、電気特有のチクチクした痛みを伴わず、優れた深部浸透性により、深層筋肉まで作用します。

絶えず周波数が変化するため、電気刺激への筋肉の慣れを防ぎ、効果的なトリートメントを提供します。

ワンジョグダイヤル



直感的に操作可能なフルカラータッチパネルを搭載。また、出力チャンネルの複数選択により、使いたいチャンネルをタッチし、ジョグダイヤルをまわせば

同時に出力を上げることが可能です。忙しいトレーナー活動中でも作業工程を最小限に抑えます。

多機能で豊富な導子

ポイントプローブ (ダブル)

筋や腱を把持しやすく、適度な圧を加えながら施術を行うことができます。



粘着導子

曲面や凹凸のある部位にもしっかりと貼り付けることができます。



グローブ導子*

手のひらや指先を使い患部の状態を常に感じながら施術を行うことができます。



*グローブ導子はオプション品です。



M³wave
EMS

2.7kHz
MCR

目的に合わせた4つのモード

1 ケアモード

スポーツにおいて起きる様々なシーンで活躍できるモードとして設定。特殊波形M³waveが浅層の筋肉はもちろん、深層の筋肉までの運動をサポートします。

2 トレーニングモード

筋肉の種類を問わず、出力と同時に効果的な筋運動をさせることで、日頃使われていない筋肉の運動をサポートします。

3 リカバリー(MCR)モード

マイクロカレント
変調多重型微弱電流(M³マイクロカレント)を搭載したモード。ハードなトレーニング後のコンディショニングを整えます。

4 ボディメイクモード

ケアモードとトレーニングモードの特性をチャンネルによって分けたモード。異なるモードを合わせる事で、それぞれの筋肉の状態によって分けていたモード選択のわずらわしさから解放します。

SPEC



定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
出力周波数	1~125,000Hz
最大出力電流	M ³ wave:約70mA _{rms} (500Ω負荷時) 微弱M ³ wave:約800μA _{rms} (500Ω負荷時)
タイマー	1~99分
チャンネル数	出力独立2チャンネル
本体寸法(約)	幅340mm × 奥行225mm × 高さ90mm
本体重量(約)	2.5kg

※本製品は医療機器ではありません。

OPTION

バッテリーや専用ケース・カートを選択できるオプション品としてご用意しました。
ご希望の用途に合わせたセットでさまざまなシーンに対応します。

バッテリー



専用ケース



カート



ホワイト

ブラック

■標準付属品

- ACアダプター 1個
- ACコード 1個
- パッドコード 1.7m 各色2本
- 粘着導子(4枚入り) 2袋

※仕様及び規格はお断りなしに変更することがあります。

- ポイントブロープ(ダブル) 1本
- 取扱説明書 1冊
- 保証書 1枚
- 保証登録はがき 1枚

※製品の色はカタログの色と異なる場合があります。

■オプション品

- バッテリーシステム
- ソフトケース
- カート(ホワイト)
- カート(ブラック)
- グローブ導子

■製造販売元



【本社】 〒956-0804 新潟県新潟市秋葉区荻島2-30-15
TEL.0250-21-6251 FAX.0250-24-2151

■本製品のお問い合わせは

販売店



※本誌の一部または全部を無断で複製することは複製権(著作権法第21条)の侵害にあたります。
また、それらをインターネットなどで公開することも公衆送信権(著作権法第23条)の侵害にあたります。